




SULCUS GINGIVAL & ZONES DIFFICILES D'ACCÈS

Retirer les résidus de plaque au niveau du sillon gingival et des zones difficiles d'accès comme les faces postérieures des dents de sagesse et les molaires en zone postérieure.

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

SULCUS GINGIVAL :

1

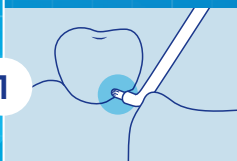


Placez la Monotouffe Inava Précibrush au niveau du **sulcus gingival** (à la jonction entre la gencive et la dent).

2



Effectuez des **petits mouvements de va-et-vient** le long de la ligne gingivale sur les faces buccales et linguales des dents.

AUTRES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS :

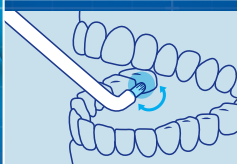

Placez la Monotouffe Inava Précibrush au niveau du **sulcus gingival**, et réalisez de **petits mouvements de va-et-vient doux**, en balayant doucement toute la surface de la dent.

ORTHODONTIE

Nettoyer les zones difficiles d'accès où la plaque dentaire s'accumule : autour des attaches des appareils orthodontiques (brackets, taquets, fils de rétention).

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

1




Placez la Monotouffe Inava Précibrush sur la zone à **nettoyer** (brackets, taquets, fils de rétention).

2



Brossez la zone en effectuant des **petits mouvements circulaires** jusqu'à ce que toute la plaque dentaire soit éliminée.

3

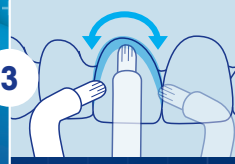


Placez la Monotouffe Inava Précibrush au niveau du **sulcus gingival** et effectuez des **mouvements de va-et-vient** pour éliminer les résidus de plaque dentaire.


IMPLANTS

Nettoyer l'implant au plus proche du sulcus gingival.

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

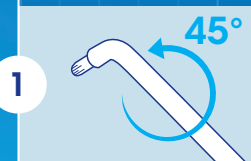

1 Orientez la Monotouffe Inava Précibrush à 45° grâce à son manche long ergonomique.

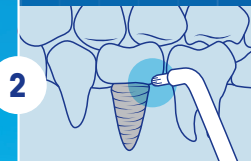

2 Nettoyez en douceur les faces linguales et buccales du sulcus gingival pour retirer tous les résidus de plaque.

CONSEIL


Pour les faces **mésiales** et **distales**, utiliser les **brossettes interdentaires Inava**.

Effectuer des **mouvements doux** pour préserver les gencives. Un **brossage au plus près des implants** permettra d'éviter une invasion des bactéries de la plaque pouvant causer une péri-implantite.


APPLICATION DE GEL

Appliquer avec précision sur la zone concernée un gel dentaire ou gingival.

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

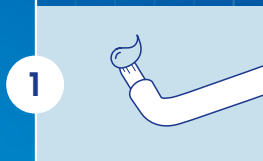

1 Déposez une noisette de gel sur la Monotouffe Inava Précibrush.

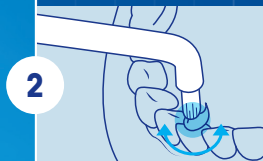

2 Appliquez le gel sur la zone concernée notamment au niveau des points de suture délicatement, ne pas hésiter à faire **plusieurs va-et-vient** pour bien appliquer le gel sur toute la zone visée.



3 Ne pas rincer le gel pour plus d'efficacité.

DÉPOSEZ VOTRE GEL ASSAINISSANT AVEC LA MONOTOUFFE Inava PRECIBRUSH



Elugel

Gel assainissant à la chlorhexidine (0,20%), idéal pour les zones où le brossage est difficile (post-opératoire et zones sensibles).



Bien rincer après chaque utilisation à l'eau ou avec un bain de bouche assainissant. **Changez** la Monotouffe Inava Précibrush lorsque les brins sont abimés ou s'évasent.